
FibroMax

Referinţa internă : AA2513

Date demografice	
Sex	Bărbat
Data naşterii	20/09/1970

Analize	
Data prelevării	29/07/2010
Context clinic principal	Necunoscut
Alfa2 Macroglobulină (g/l)	2.33
Haptoglobină (g/l)	0.50
Apolipoproteină A1 (g/l)	1.29
Bilirubină (microMol/l)	10.26
Gamma GT (UI/l)	53
ALAT/TGP (UI/l)	129
ASAT/TGO(UI/l)	76
Glicemie a jeun (mmol/l)	5.35
Trigliceride (mmol/l)	0.81
Colesterol total (mmol/l)	4.37
Greutate (kg)	75.00
Înălţime (metri)	1.78

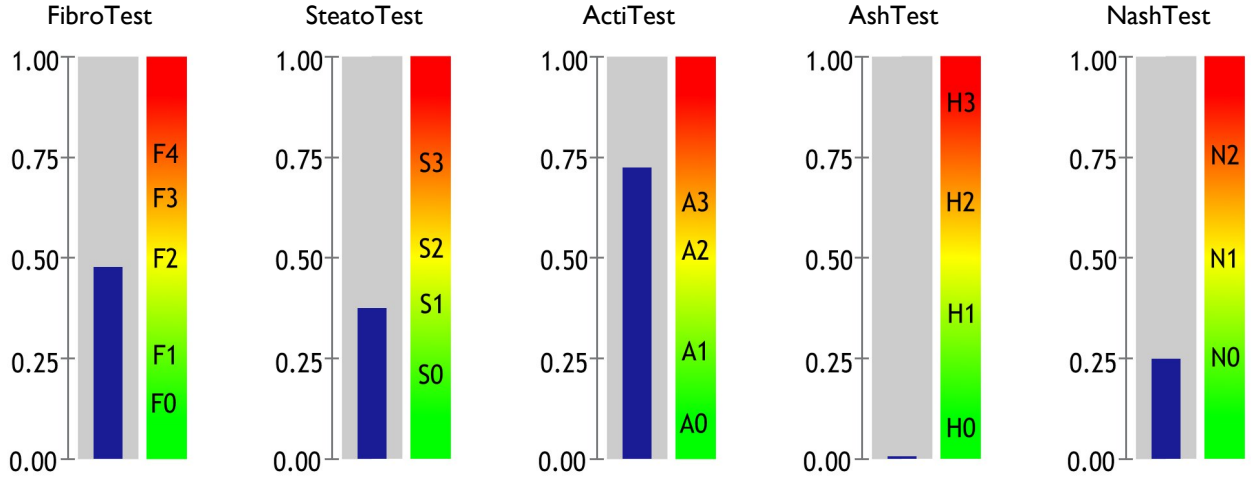

Score: 0.48 (F1-F2)	Score: 0.38 (S0-S1)	Score: 0.73 (A3)	Score: 0.01 (H0)	Score: 0.25 (f□r□ Nash)

Precauţii de utilizare :

- Fiabilitatea rezultatelor depinde de respectarea condiţiilor analitice şi preanalitice recomandate de către BioPredictive.
- Testarea trebuie amânată în caz de : hemoliză acută, hepatită acută, inflamaţie acută şi colestază extrahepatică.
- Se indică avizul unui specialist pentru interpretarea testelor în caz de hemoliză cronică şi sindrom Gilbert.
- Interpretarea testelor nu e validată în cazul pacienţilor transplantaţi hepatic.
- O valoare izolată extremă a unuia dintre parametrii testelor necesită o interpretare prudentă a rezultatelor.
- În caz de discordanţă între rezultatul unui test şi cel al biopsiei se recomandă avizul unui specialist. Cauza discordanţei poate fi un eşec al testului sau un eşec al biopsiei: de exemplu, biopsia are o variabilitate de 33% în stadializarea fibrozei hepatice pentru eroarea de un stadiu.
- FibroTest şi SteatoTest sunt interpretabile în hepatitele cronice virale B şi C, steatoza alcoolică şi nealcoolică.
- NashTest se interpretează în steatoza de origine non alcoolică.
- AshTest se interpretează în steatoza de origine alcoolică.
- ActiTest se interpretează în hepatitele cronice B şi C.


FibroTest

FibroMax

Cum citim foaia de rezultat ?

Acest prospect prezintă toate testele BioPredictive pentru principalele boli hepatice.
Datele folosite pentru aceste teste din prospect sunt fictive și au o doar valoare explicativă.
Rezultatul examinării dumneavoastră personale nu apare pe acest document, ci pe foaia de rezultat.

Numele testului

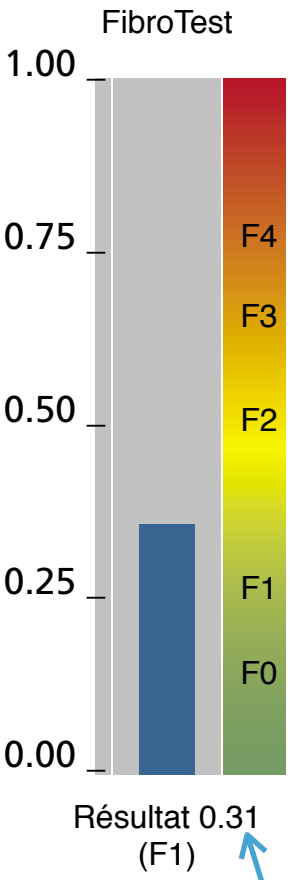


Rezultatul de la 0 la 1

Interpretarea lui (a se vedea alături)

FibroTest

Evaluează țesutul cicatriceal hepatic (fibroza)

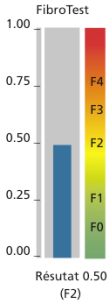


FibroTest este testul seric care permite evaluarea fibrozei hepatice :

- F0 : fără fibroză
- F1 : fibroză minimă
- F2 : fibroză moderată
- F3 : fibroză avansată
- F4 : fibroză severă

Fibroza : cicatrice difuză a ficatului aparută ca o reacție la atacul virusului, grăsimilor sau alcoolului. În mod curent fibroza hepatică este comparată cu un țesut cicatriceal ce progresează în ficat.

SteatoTest

Evaluează supraîncărcarea în grăsime (steatoză hepatică sau "ficat gras")

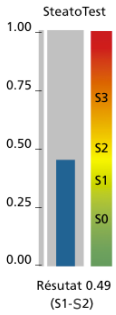


SteatoTest este testul care permite evaluarea steatozei hepatice :

- S0 : fără steatoză (<1%)
- S1 : steatoză minimă (1-5%)
- S2 : steatoză importantă (6-32%)
- S3 : steatoză severă (>32%)

Steatoza : acumularea de grasime în ficat provocată de anomalii ale metabolismului (colesterol, trigliceride, diabet zaharat, exces ponderal). Steatoza hepatică este numită în mod curent "ficat gras".

ActiTest

Evaluează activitatea (inflamația din hepatitele virale cronice B și C)

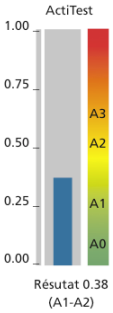


ActiTest este testul care permite evaluarea inflamației :

- A0 : fără activitate
- A1 : activitate minimă
- A2 : activitate importantă
- A3 : activitate severă

Activitatea : inflamația ficatului provocată de virus. Activitatea este comparată cu inflamația de la o arsură.

NashTest

Evaluează inflamația (pentru bolile metabolice : diabet zaharat, exces ponderal, colesterol, trigliceride)

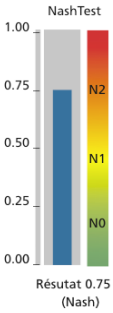


NashTest este testul care permite evaluarea steato-hepatitei non alcoolice (Nash):

- N0 : fără inflamație
- N1 : posibilă inflamație
- N2 : inflamație

Nash : inflamația ficatului asociată steatozei. Nash este reacția excesivă a organismului față de acumularea de grăsime în ficat. Inflamația este comparată în mod curent cu o arsură.

AshTest

Evaluează inflamația (în excesul de alcool)

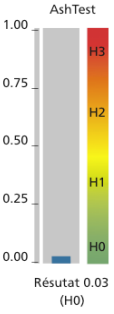

AshTest este testul care permite evaluarea inflamației provocată de alcool :

- H0 : fără inflamație alcoolică
- H1 : inflamație alcoolică moderată
- H2 : inflamație alcoolică importantă
- H3 : inflamație alcoolică severă

Activitatea : inflamația ficatului provocată de alcool. Activitatea este comparată cu inflamația de la o arsură.

Pentru a afla mai multe, cereți sfatul medicului dumneavoastră.

FibroMax ™ reunește toate aceste teste întrun singur examen.

www.biopredictive.com

BioPredictive S.A.
40 rue du Bac
75007 PARIS
Tel : +33 1 45 44 30 64

BioPredictive